

SCHEDA TECNICA

Ambu BlueSensor BR radiotrasparente è dotato di un gel solido che non irrita la pelle e fornisce una qualità di segnale stabile nel monitoraggio neonatale. Il materiale di supporto in morbido tessuto rende l'elettrodo comodo da indossare per lunghi periodi. L'elettrodo BR è disponibile solo con cavetti precollegati (con codice colore opzionale).

Caratteristiche principali

- Il gel solido delicato sulla pelle sostiene la qualità del segnale e permette eventuali riposizionamenti
- Il materiale di supporto in morbido tessuto permette alla pelle di respirare
- La taglia extra piccola è adatta ai neonati
- La radiotrasparenza permette all'elettrodo di rimanere sul paziente durante le procedure radiografiche
- CND: C020501
- RDM: 2259462

Ambu® BlueSensor BR

Elettrodo ECG Monouso



Gel solido




Supporto in
tessuto



Sensore in
argento



Radiotrasparente

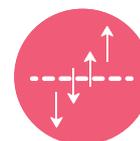

Supporto
traspirante

SPECIFICHE

Dimensioni

Misura elettrodo (Lunghezza x larghezza in mm)	28 x 20
Misura contatto con pelle (diametro in mm)	28 x 20
Area adesivo (in mm ²)	503

Sensore

Materiale del sensore	Argento/Cloruro di argento (Ag/AgCl)
Sistema gel	Solido
Area gel/area di misurazione (in mm ²)	503

Dati elettrici (ANSI/AAMI)

Impedenza AC - tipica	700 Ω
Tensione di offset DC - tipica	3.3 mV
Recupero del sovraccarico da defibrillazione - tipico	17.85 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	-0.38 mV/s
Instabilità di offset combinata e rumore interno	2 μV
Tolleranza alla corrente di polarizzazione (oltre 8h)	7.2 mV

MATERIALI

Elettrodo

Biocompatibile	Si
Materiale di supporto	Tessuto non tessuto in poliestere
Porta sensore	Cloruro di polivinile riempito di carbonio
Adesivo	Gel solido
Anima del cavo	Carbonio
Isolante del cavo	Cloruro di polivinile (PVC)
Connettore del cavo	Ottone/polipropilene (PP)
Liner di rilascio	Film in poliestere silicizzato

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI*

Ref**	Unità/foglio	Unità/busta	Unità/scatola	Unità/scatolone
BR-50-K/3	3	3	600	1200
BR-50-K/US/3	3	3	600	1200
BR-50-A/12	3	12	600	1200
BR-50-K/12	3	12	600	1200
BR-50-K/EU/12	3	12	600	1200
BR-80-A/12	3	12	600	1200
BR-80-K/12	3	12	600	1200

BR-50-A ■ Prodotto ■ Lungh. cavo ■ Connettore

*alcune configurazioni potrebbero non essere disponibili in tutto il mondo

**Cavi colorati:

EU: nero, rosso, giallo

US: nero, verde, bianco

Ambu

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
20864 Agrate B.za
Italia
T +39 0396578100
ambu.it

CE US: Rx only

CONNETTORI



A = Connettore 4 mm



K = Connettore 1,5 mm



F = Connettore 3 mm

Ambiente

Elettrodo senza lattice
Cavo senza lattice
Packaging senza PVC

Raggi-X e MRI

Radiotrasparente	Si
Compatibilità RM	No

Durata

Buste aperte	1 mese
Buste chiuse*	18 mesi

*Dalla data di produzione

Packaging

Busta (strati esterni/ mediani/interni)	Poliestere/ alluminio/ polietilene
--	--

Scatole	Cartone
---------	---------

Opzioni

Precablato	A, F, K
------------	---------

Precauzioni

Monouso