

# Ambu® Disposable Pressure Manometer

## SCHEDA TECNICA

Il manometro monouso di Ambu è destinato all'utilizzo per il monitoraggio della pressione delle vie aeree del paziente. Il manometro pressione monouso Ambu può essere utilizzato con i palloni rianimatori Ambu, palloni per iperinflazione, maschere o circuiti CPAP.

Il manometro di pressione monouso Ambu è compatibile con la risonanza magnetica e pertanto può essere utilizzato in ambienti RM nelle seguenti condizioni:

Campo magnetico statico di 7 Tesla e inferiore, con:

- Gradiente di campo spaziale massimo di 20.000 G/cm (200T/m)
- Massimo prodotto della forza di 902.000.000 G<sup>2</sup>/cm (902 T<sup>2</sup>/m)

L'uso all'interno del tunnel RM può influenzare la qualità dell'immagine RM.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibilità RM condizionale

Il design sottile facilita il monitoraggio della pressione con minima ostruzione della vista del volto del paziente

Il concetto di utilizzo su un singolo paziente offre un rischio minimo di infezione incrociata

Il manometro ha una scala graduata a colori per fornire un migliore supporto visivo durante la ventilazione. La scala di codifica dei colori è solo per supporto visivo

CND: R9099

RDM: 66176/R

Dispositivo di Classe IIa - non sterile

# Ambu

## SPECIFICHE

### Dimensioni

Lunghezza	55 mm (2.17")
Diametro	22 mm (0.87")
Peso	6.9 g
Misura connettore	ID 4.0 mm (0.16")

### Materiali

Connettore	SEBS
Vite	CuSn
Alloggiamento	SB
Pistone	PP
Membrana	Silicone
Temperatura operativa	-18 °C a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C a +60 °C


### Misura

Limiti misurazione	5 - 60 cmH <sub>2</sub> O (hPa)
Accuratezza	± 2 cmH <sub>2</sub> O (hPa) a 5, 10, 15, 20 e 30 cmH <sub>2</sub> O (hPa) ± 3 cmH <sub>2</sub> O (hPa) a 40 cmH <sub>2</sub> O (hPa) ± 5 cmH <sub>2</sub> O (hPa) a 60 cmH <sub>2</sub> O (hPa)

## SPECIFICHE ORDINE

### Ref.

322003000CN	Ambu Disposable Pressure Manometer CN 20 pezzi per scatola, 240 pezzi per scatolone
322003000	Ambu Disposable Pressure Manometer EU 15 pezzi per scatola, 180 pezzi per scatolone
322004000	Ambu Disposable Pressure Manometer US 20 pezzi per scatola, 240 pezzi per scatolone

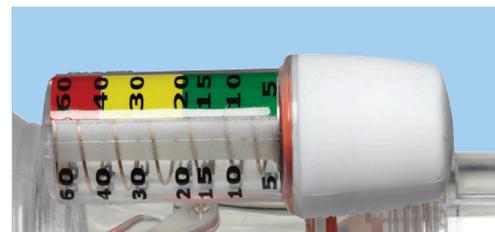

Manometro di pressione monouso Ambu collegato ad Ambu SPUR II

# Ambu

**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
ambu.com

**Ambu S.r.l.**  
Via Paracelso, 20  
20864 Agrate B.za  
Italia  
T +39 0396578100  
ambu.it

CE 2797

US: Rx only