

SCHEMA TECNICA

VivaSight Endobronchial Blocker Tube è un bloccatore endobronchiale monouso per la ventilazione monopolmonare (OLV).

È un catetere dalla punta a palloncino "guidabile" sterile e monouso che viene guidato visivamente verso un segmento bronchiale selezionato per risolvere il blocco del palloncino delle vie aeree distali.

La punta distale angolata di VivaSight Endobronchial Blocker Tube può essere regolata per facilitare la navigazione verso i bronchi.

La ventilazione monopolmonare (OLV) semplificata


Per la guida visiva e il posizionamento, il VivaSight Endobronchial Blocker Tube può essere utilizzato con il tubo a singolo lume VivaSight 2 SLT con videocamera integrata.

Se utilizzato in combinazione con VivaSight 2 SLT, consente una visualizzazione continua del tubo e del bloccatore endobronchiale per tutta la durata della procedura.

Per la ventilazione monopolmonare il portfolio di visualizzazione Ambu comprende anche Ambu® VivaSight™ 2 DLT, un tubo a doppio lume con videocamera integrata, VivaSight 2 SLT, un tubo a singolo lume con videocamera integrata, nonché il broncoscopio monouso aScope™ 4 Broncho Slim.

VivaSight Endobronchial Blocker può essere utilizzato insieme a VivaSight 2 SLT. I dispositivi possono essere collegati al monitor full-HD Ambu® aView™ 2 Advance, per immagini di alta qualità e una visione doppia/Dual View.

Ambu® VivaSight™ Endobronchial Blocker Tube

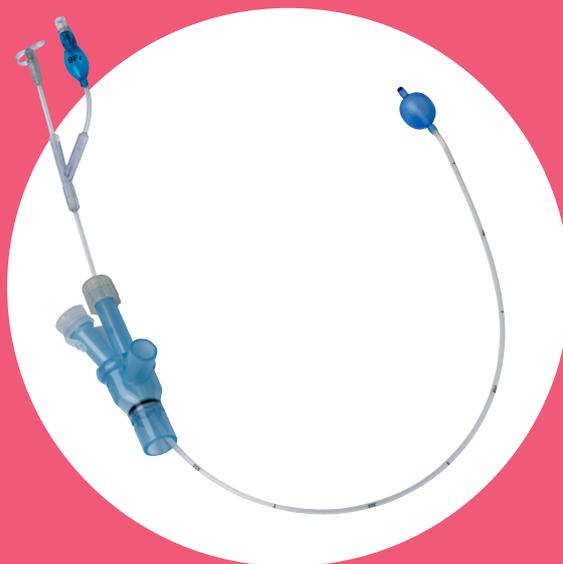

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibile con Ambu® VivaSight™ 2 SLT per la visualizzazione del SLT e bloccatore endobronchiale durante procedure di OLV

Ambu

SPECIFICHE TECNICHE

Ambu® VivaSight™ Endobronchial Blocker Tube	Misura	Lunghezza (±5 mm)
412900000	9 Fr	695 mm

Generale: VivaSight Endobronchial Blocker Tube presenta una cuffia in silicone blu
Uso: Dispositivo monouso. Sterile (ETO) se la confezione non è aperta o danneggiata
Confezione: Confezionato singolarmente
Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce.
Durata e magazzino: 60 mesi
 Il prodotto non è realizzato con ftalati

SPECIFICHE D'ORDINE


Ambu® VivaSight™ Endobronchial Blocker Tube	Codice prodotto	Quantità/box
Ambu® VivaSight™ Endobronchial Blocker Tube	412900000	5

Ambu® VivaSight™ 2 SLT Kit	Codice prodotto	Quantità/box
Ambu® VivaSight™ 2 SLT 7.0 mm (con cavo adattatore)	412701000	5
Ambu® VivaSight™ 2 SLT 7.5 mm (con cavo adattatore)	412751000	5
Ambu® VivaSight™ 2 SLT 8.0 mm (con cavo adattatore)	412801000	5

Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kits	Codice prodotto	Quantità/box
Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kit - 7.0 mm, 9 Fr (con cavo adattatore)	412709000	5
Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kit - 7.5 mm, 9 Fr (con cavo adattatore)	412759000	5
Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kit - 8.0 mm, 9 Fr (con cavo adattatore)	412809000	5

Monitor	Codice prodotto	Quantità/box
Ambu® aView™ 2 Advance Monitor	405011000*	1

*Il numero di articolo dei monitor è diverso per ogni paese. Si prega di contattare il rappresentante locale per conoscere il numero corretto nel proprio paese.
 Configurazione 405011000EUA1: Blu-Blu-Grigio
 Configurazione 405011000EUA2: Verde-Blu-Grigio

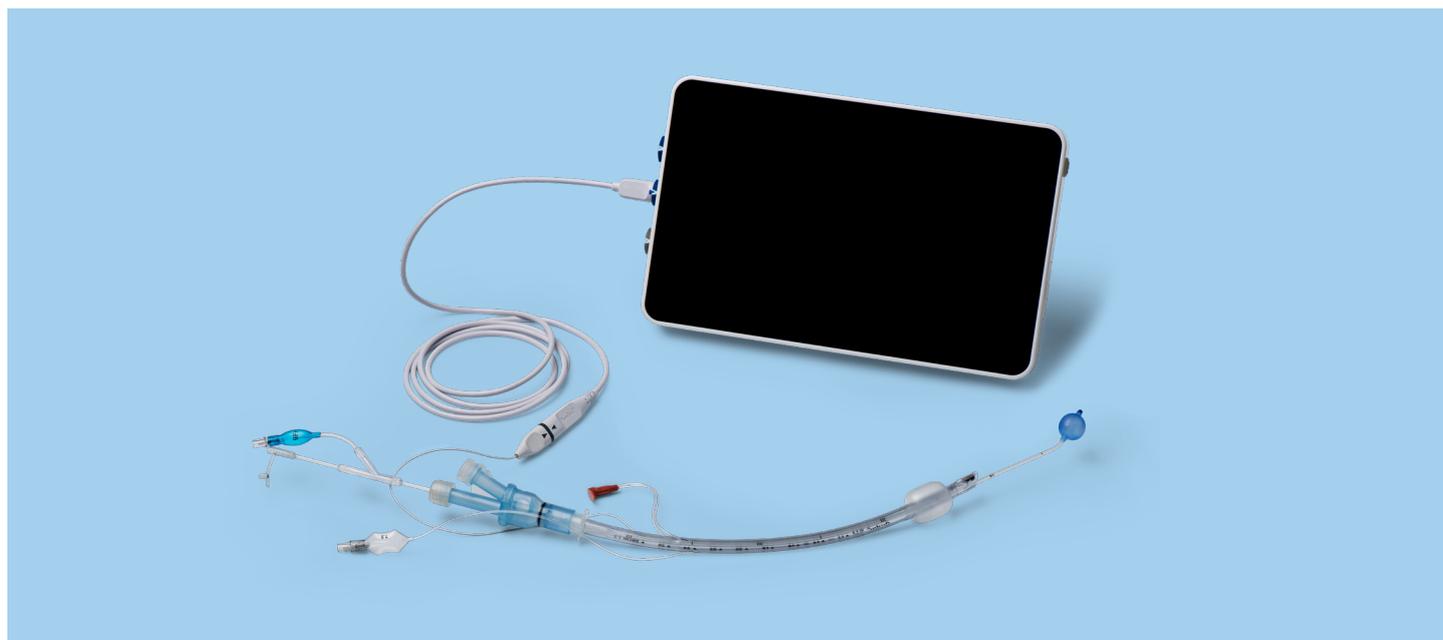

Ambu® VivaSight™ Endobronchial Blocker in uso con Ambu® VivaSight™ 2 SLT e il monitor Ambu® aView™ 2

Ambu

Ambu® VivaSight™
 Endobronchial Blocker
 Tube is manufactured by:
 Well Lead Medical Co., Ltd.
 C-4 Jinhu Industrial Estate
 Hualong, 511434 Panyu,
 Guangzhou
 People's Republic of China

EU Importer
 Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 T +45 7225 2000
 ambu.com

Ambu Srl
 Via Paracelso 20
 20864 Agrate Brianza
 Italia
 T +0396578100
 italia@ambu.com
 ambu.it

