


AMBU AURAGAIN™

Accesso gastrico, capacità di intubazione ed elevata pressione di tenuta, un nuovo livello di **sicurezza** ed **efficacia**.

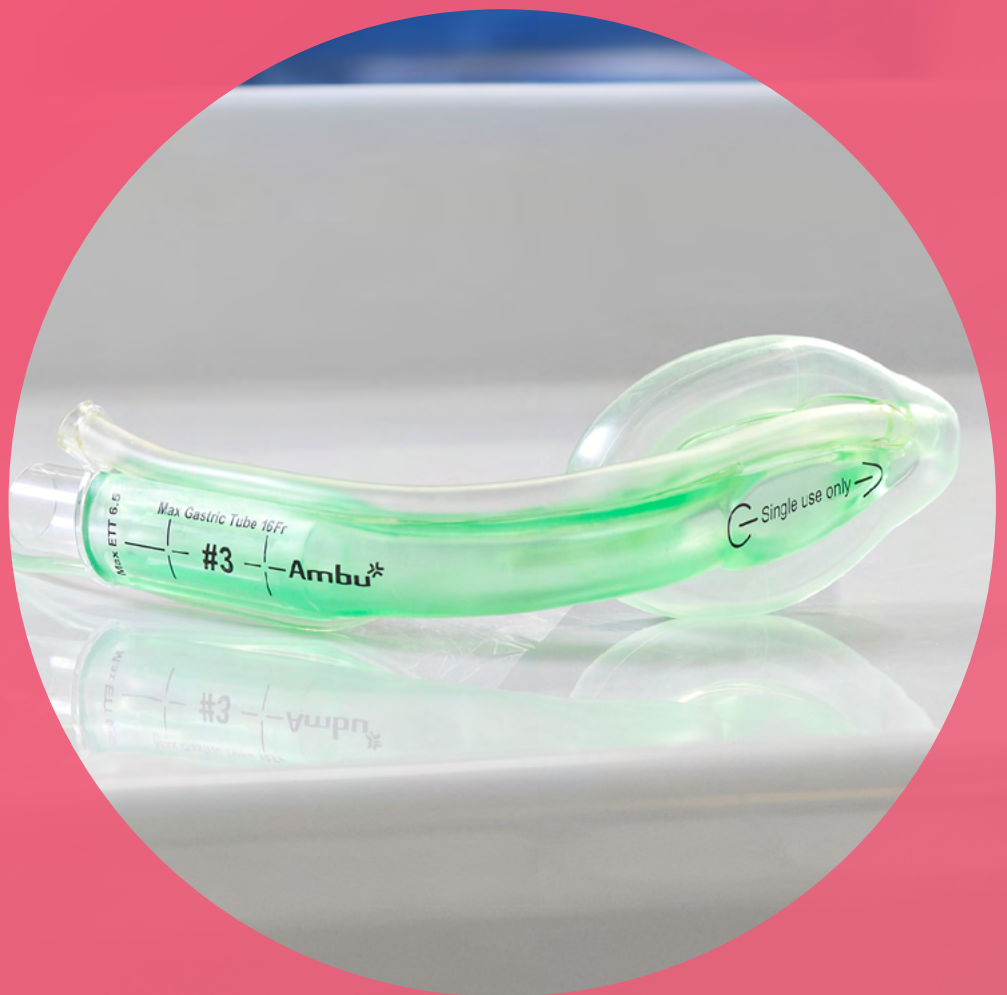

Ambu

AuraGain è l'unica via aerea sovraglottica anatomicamente curva con accesso gastrico e capacità di intubazione integrata, che porta la sicurezza del paziente e la gestione delle vie aeree a un nuovo livello.



Gestione delle vie aeree semplice

Ambu AuraGain consente l'intubazione diretta per la gestione di una via aerea difficile, prevista o imprevista

In caso di situazione di impossibilità di intubazione e ventilazione in maschera, in cui l'obiettivo è intubare il paziente, AuraGain può essere utilizzata come condotto per l'intubazione endotracheale diretta.

Stabilità ottimale

Ambu AuraGain consente un posizionamento rapido e corretto grazie alla curva anatomica preformata

La curva è preformata per seguire l'anatomia umana offrendo un posizionamento rapido e prestazioni a lungo termine.



**TENUTA DI PRESSIONE
FINO A
40 CM H₂O**

Facile controllo gastrico

Ambu AuraGain è un dispositivo di seconda generazione che consente una facile aspirazione e decompressione dello stomaco attraverso un sondino gastrico.

AuraGain è stata progettata per facilitare il posizionamento del tubo gastrico aggiungendo un canale a basso attrito all'interno del tubo di drenaggio. Una volta posizionato il sondino gastrico, è possibile aspirare attivamente o passivamente il contenuto gastrico.

Versatilità a tutto campo

Ambu AuraGain è una scelta sicura sia per i casi di routine che per quelli più avanzati.

AuraGain integra caratteristiche di sicurezza in una maschera dal rapido posizionamento. Ciò significa che il dispositivo può essere utilizzato efficacemente sia nei casi di routine che in quelli avanzati.

Uno sguardo al pianeta

Ambu AuraGain è la prima maschera con dispositivi di protezione in bioplastica


Grazie all'introduzione della bioplastica nell'involucro di protezione della cuffia, vi è una riduzione dell'emissione CO2 del 65% rispetto allo stesso involucro delle generazioni precedenti.

Inoltre, abbiamo ridotto le dimensioni dell'imballaggio, apportando una riduzione dell'utilizzo di plastica dal 16 al 47%*.

*in base alla misura della maschera



**CANALE GASTRICO
FINO A 16 FR**

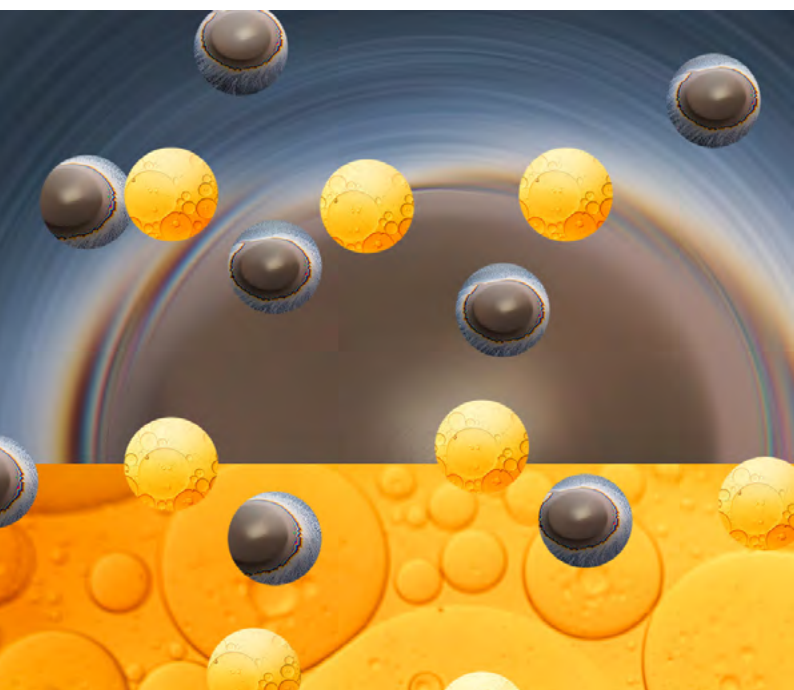

L'introduzione della bioplastica riduce l'uso di plastica di origine fossile



La bioplastica deriva da un mix di materie prime di origine fossile e di seconda generazione, come l'olio da cucina esausto. Questo riduce l'uso di plastica di origine fossile, senza entrare in conflitto con la produzione alimentare e agricola.

"In particolare... Ambu AuraGain ha ottenuto una delle pressioni più elevate classificandosi tra i migliori dispositivi grazie al tubo di ventilazione curvo e la cuffia gonfiabile che consente una migliore conformità ai contorni anatomici dell'ipofaringe di un individuo. Dalla meta analisi si comprende anche che Ambu AuraGain è tra i dispositivi con il tasso di insorgenza di mal di gola post-operatorio più basso..."

Comparison of the efficacy of supraglottic airway devices in low-risk adult patients: a network meta-analysis and systematic review. Sci Report, NATURE. 2021

ALTRE CARATTERISTICHE

Bloccamorsso integrato

AuraGain è dotata di un bloccamorsso incorporato che protegge dall'occlusione delle vie aeree assorbendo la pressione esercitata su di esso nel caso in cui il paziente morda la maschera.

Cuffia morbida e gonfiabile

Ambu AuraGain garantisce un'elevata pressione di tenuta con un basso gonfiaggio della cuffia, riducendo al minimo il trauma causato dalla pressione sui tessuti molli e il rischio di aspirazione.

Alta pressione di tenuta

La cuffia ultrasottile e morbida si adatta efficacemente all'anatomia del paziente fino ad una pressione di 40 cm H₂O.

Facilita l'intubazione diretta

Il tubo di ventilazione di AuraGain facilita l'intubazione diretta in maschera tramite fibroscopio accomodando tubi ETT fino a 8.0 mm.

Domande? Contatta il tuo rappresentante Ambu al **039 6578100** o visita **www.ambu.it**

Ambu FOREVER FORWARD

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 0396578100
ambu.it